



**alineadent**<sup>®</sup>  
queremos que  
**tu sonrisa**  
sea nuestra sonrisa



# ¿Qué es alineadent?

Alineadent es el corrector dental invisible más avanzado del momento. Consiste en una serie de alineadores removibles e invisibles fabricados en policarbonato, un material transparente muy resistente.

Se fabrica a medida de cada paciente y resulta prácticamente invisible ideal para pacientes que desean pasar inadvertidos.

**alineadent**




# ¿Cómo funciona?

El tratamiento Alineadent consiste en una secuencia de alineadores removibles que corrigen secuencialmente los dientes moviendo su posición hacia el punto deseado de manera controlada y progresiva.

Esta secuencia está formada por alineadores de diferente grosor de manera que ejercen más o menos presión y fuerza en función del momento del tratamiento en el que se encuentre el paciente.

En un inicio los alineadores tienen menor grosor y son más flexibles para comenzar el movimiento hasta que, finalmente, el alineador adquiere mayor grosor para afianzar la posición que deseamos sirviendo además al paciente como retenedor. De esta forma todos los alineadores, desde el inicial hasta el final serán activos.

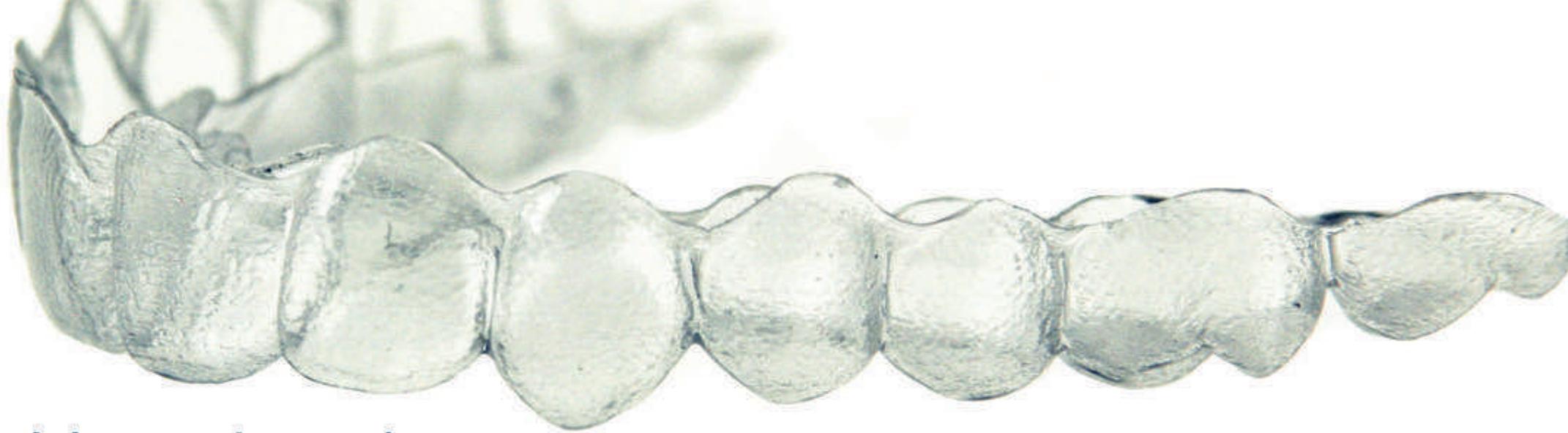

# Ventajas de Alineadent

**Más preciso:** Alineadent es un tratamiento cuyo proceso de fabricación es completamente digital, es por ello que se minimizan los errores ocasionados a diferencia de otros métodos tradicionales. Además utiliza un software 3D que nos facilita mayor precisión del diagnóstico y tratamiento y, por tanto, mayor precisión en el resultado obtenido.

**Más cómodo:** Frente a la ortodoncia tradicional las ventajas son indiscutibles. Alineadent permite hablar con comodidad evitando las rozaduras o heridas que provocan otros aparatos de ortodoncia. Su suave contorno finaliza justo antes del cuello de los dientes para preservar el estado de las encías y salud bucal.

**Más discreto:** Al estar fabricado con un material tipo transparente nadie notará que se lleva puesto.

**Más higiénico:** Al ser removible le permite una limpieza completa de su boca, sin correr el riesgo de retener restos de comida, como es el caso de los brackets.

**Más práctico:** La hora de comer no será una tortura, podrá comer de todo sin que suponga ningún reto personal.

**Más económico:** Alineadent es el tratamiento de ortodoncia invisible más económico del mercado ya que el número de alineadores se adapta a cada paciente; además, la digitalización de todo el proceso reduce costes de producción.

**Más rápido:** Alineadent reduce considerablemente el tiempo de tratamiento en el paciente frente a otros tratamientos de ortodoncia tradicional.




# Perfil del **paciente**

Alineadent® está indicado para todo tipo de pacientes, y es igual de eficaz en niños ( a partir de 14 años ) como en adultos.

Los alineadores transparentes Alineadent® son ideales para aquellos que quieran mejorar su estética y salud dental sin someterse a molestos y anti-estéticos tratamientos con brackets.

**alineadent**

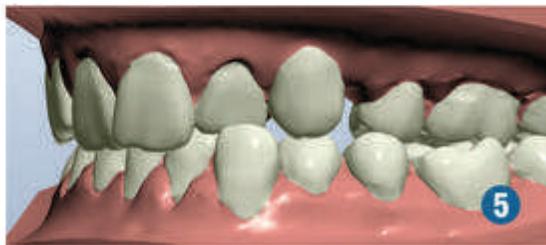


# Tipos de afecciones

Alineadent está indicado sobre todo para tratamientos de Clase I y II leve-moderado y Clase III leve.

A continuación exponemos los tipos de afecciones susceptibles de corregirse con Alineadent:

1. Diastemas
2. Apiñamiento dental y rotación
3. Resalte
4. Sobremordida
5. Mordida cruzada

# Caso real

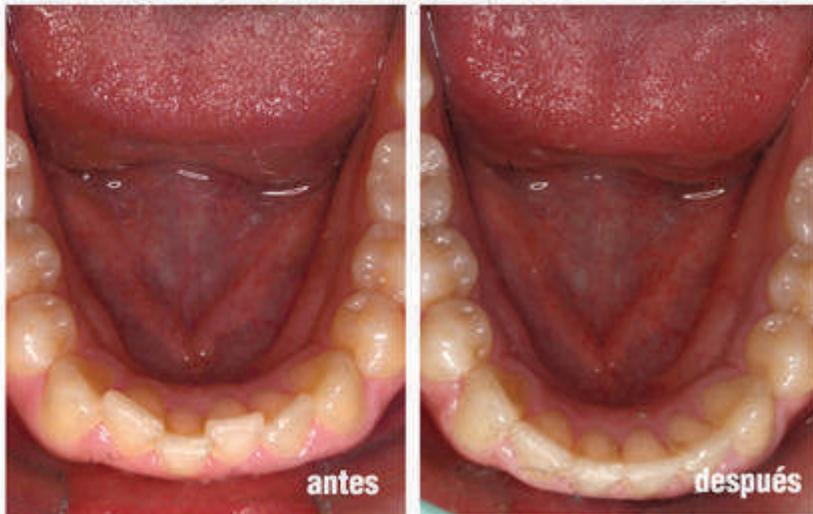

Paciente de 26 años.

Diastemas y apiñamiento dental.

**Tratamiento Alineadent**

8 alineadores superiores y 10 alineadores inferiores.

**Duración del tratamiento**

20 semanas.

A petición del doctor no se realizó stripping  
(reducción de espacio interproximal).



# Pasos a seguir

## 1

**Evalúe el caso.** Como cualquier otro tratamiento de ortodoncia necesita de una valoración previa. Si el caso es viable tome sus medidas de ambas arcadas, preferiblemente en silicona pesada y fluida tomada en dos fases o bien puede enviarnos los archivos .stl si dispone de un escaner intraoral.

En el caso de que no esté seguro de ser viable puede enviarnos al correo [info@alineadent.com](mailto:info@alineadent.com) las fotografías faciales e intraorales del paciente. Nuestro equipo de Alineadent podrá realizar una valoración aproximada del caso y así podrá asegurar su viabilidad.

Preste especial atención a la toma de impresiones, éstas deben ser lo más exactas posible. Compruebe que los cuellos de todos los dientes se encuentran bien delimitados y que no existe arrastre. Deberá enviarnos además un registro de mordida y preferiblemente fotografías faciales e intraorales.

Una vez haya tomado los registros envíenoslo junto con la hoja de prescripción en la que podrá indicar las observaciones del caso.

# Pasos a seguir

2

## Planificación del tratamiento

En el transcurso de varios días, Alineadent enviará la planificación del tratamiento a su e-mail, en ella encontrará un resumen con el coste, número de alineadores, análisis estadísticos, stripping (en caso de que lo necesite) y modelos stl (3D) que podrá visualizar en su ordenador.

Si todo está como usted desea solo tendrá que contactar con Alineadent para confirmar el caso, o en su defecto realizar las modificaciones oportunas siguiendo sus indicaciones.

3

## Recepción del tratamiento en su consulta

Una vez confirmado el caso, en un plazo de una semana usted recibirá el tratamiento Alineadent completo de su paciente.

4

## Cambio de alineador

Los alineadores deberán cambiarse cada dos semanas. El seguimiento del tratamiento se deja a su criterio. Asegúrese de que existe espacio interproximal suficiente para comenzar con la siguiente fase.



alineadent®

# Pasos a seguir

5

## Precisión final opcional

Si tras acabar el tratamiento desea corregir algún detalle más podrá solicitar los alineadores de precisión final. Estos variarán según el número de fases que haya tenido el tratamiento:

**1 - 5 alineadores:** 1 alineador de precisión final.

**6-10 alineadores:** 2 alineadores de precisión final.

**Más de 10 alineadores:** 3 alineadores de precisión final.

En el caso de que el paciente necesite más alineadores tendrá el mismo precio, 50€ por férula.

Los alineadores de precisión final se realizarán de forma gratuita si cumple los siguientes requisitos:

Solo se aceptarán casos de precisión final en un margen de un mes desde la finalización del tratamiento si el paciente no ha sufrido cambio dental (extracciones, implantes...) y ha seguido las instrucciones del tratamiento (mínimo 22 horas al día llevando puesto el alineador).



# Cursos certificados

Alineadent ofrece un programa de formación avanzada sobre nuestro sistema de ortodoncia invisible. Nuestros cursos, totalmente gratuitos, le ayudarán a ampliar su conocimiento sobre el tratamiento Alineadent, aprendiendo a valorar cada uno de los casos que se pueden realizar con nuestro sistema de ortodoncia invisible.

Los cursos son completamente compatibles con la jornada laboral pudiendo elegir la modalidad presencial u online. Solo tendrá que ponerse en contacto con nosotros y pedir una cita para un curso formativo.

# alineadent<sup>®</sup>

[www.alineadent.com](http://www.alineadent.com) | Tel. 952 21 21 74 | [info@alineadent.com](mailto:info@alineadent.com)

